



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

arco – Die neue Generation gynäkologischer Untersuchungsstühle



arco

Optimierte Nutzung, hoher Komfort, erstklassiges Design

Der neue arco verbindet ausgezeichnetes Design mit modernster Technologie und einem starken Preis-/Leistungsverhältnis.

Ergonomisch

Kopfteil-, Rücken- und Sitzpolster sind besonders gewölbt und bieten zusammen mit dem individuell anpassbaren Kopfpolster mit Magnetbefestigung der Patientin ein angenehmes und komfortables Sitzgefühl. Mit einer Aufstieghöhe von nur 550 mm können auch ältere oder körperlich eingeschränkte Patienten bequem Platz nehmen, die Sitzposition bleibt auch in tiefster Stellung waagrecht.

Stark

Ausgelegt auf eine Arbeitslast von 250 kg bietet der Stuhl viel Sicherheit und Behandlungsmöglichkeiten auch für adipöse Patientinnen.

Zeitsparend

Eine optimierte Verstellgeschwindigkeit und bis zu vier frei wählbare Memorypositionen (modellabhängig) sorgen für eine rasche Einstellung in die gewünschte Position.

Funktionell

Der tiefe Gynausschnitt von 155 mm bietet verbesserten Zugang zum Untersuchungsfeld. Die Sekretschale bleibt auch bei Beckenhochlagerung in der Waage.

Mobil

Verdeckte Rollen (optional) machen den Untersuchungsstuhl zu einer mobilen Einheit, für eine flexible Nutzung von Behandlungsbereich und Raumausstattung. Die Zentralfeststellung sorgt für eine schnelle und sichere Positionierung.

Hygienisch

Ebene, geschlossene Flächen und der Verzicht auf Ecken und Kanten gewährleisten optimierte hygienische Voraussetzungen und eine einfache Reinigung. Sogar der Bereich unter dem arco kann durch seine Mobilität (optional) gereinigt werden.

Made in Germany





Mit seinen vielfältigen, farblichen Auswahlmöglichkeiten und dem prämierten Design lässt der arco keine Gestaltungswünsche offen und fügt sich als optisches Highlight in den Untersuchungsraum ein.



reddot award 2017
winner

Abbildung:
114.8700.0 mit Fußstützen 101.0456.0,
Kunstlederbezug 101.0473.0,
Sekretschale mit Komforthalterung 101.0495.0,
LED-Ambientebeleuchtung 101.0487.0 und
Farbblende 101.0488.0

arco Farben:
Polster himbeerrot 103
Lackierung weißaluminium RAL 9006
Kunststoffteile silbergrau

arco mit Orbit

Das klare Einrichtungskonzept für die gynäkologische Praxis



Ob die niedrige Einstiegshöhe, die der Patientin das Platznehmen erleichtert, eine Memoryfunktion, die den Stuhl schnell in die Untersuchungsposition bringt oder der tiefe Gynausschnitt, der die Untersuchung vereinfacht – die Untersuchungsstühle der Serie arco sind auf die speziellen Anforderungen des Praxisalltags ausgerichtet.

Perfekt ergänzt wird arco durch Orbit – das modulare Ver- und Entsorgungskonzept für den gynäkologischen Arbeitsplatz, das sich jeder Einrichtungssituation anpasst. So wird arco Teil eines besonders funktionalen Einrichtungskonzepts, das in vielen attraktiven Farbvarianten erhältlich ist.

Weitere Informationen zu unserem Orbit Programm finden Sie im Katalog Nr. 75 oder auf unserer Website.



Farben in den Abbildungen:
arco:
Polster himbeerrot 103
Lackierung weißaluminium RAL 9006
Kunststoffteile silbergrau

Drehhocker:
Polster himbeerrot 103

Orbit:
Körper weißaluminium RAL 9006
Front erikaviolett RAL 4003
Blendleiste erikaviolett RAL 4003
Bügelgriffe halbrund weißaluminium RAL 9006
Kunststoffteile silbergrau



Beschreibung



114.8500.0

arco 100 114.8500.0

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Beckenhochlagerung elektromotorisch, Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktionen über Fußbedienung.



114.8600.0 und 114.8700.0

arco 100 M 114.8600.0

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Ausführung wie 114.8500.0, jedoch zusätzlich mit Memory-Funktion für 2 Positionen. Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.

arco 200 M 114.8700.0

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, Memory-Funktion für 4 Positionen, Beckenhochlagerung und **Fußstützen (Zubehör) elektromotorisch verstellbar**, Rückenteil im feststehenden Winkel (50°) mit dem Sitzteil verbunden, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.

Achtung!

Alle Grundtypen ohne Beinlagerungssystem, bitte wählen Sie aus 3 Möglichkeiten! (Seite 8/9)



Hand- und Fußbedienung

- flexible Positionierung der herausnehmbaren Fußbedienung für entspanntes und bequemes Arbeiten
- Speicherung und Abrufen von bis zu 4 Memory-Positionen
- Sanfter Anlauf der Stuhlbewegungen
- Steuerung aller Bewegungsabläufe über Fuß- und Handbedienung

Serienmäßige Ausstattung:

Sitz-, Rücken- und Kopfteilverpolster ergonomisch gepolstert, Sekretschale aus Chromnickelstahl, im Kunststoffrahmen, in fester Positionierung pendelnd gelagert, herausnehmbar, 325 x 175 x 65 mm (B x L x H), 2,5 Liter Volumen. Magazin zur Aufnahme von 400 oder 500 mm breiten Papierrollen, max. Durchmesser 140 mm, Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster. Mit Fußbedienung, Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidung silber, Rahmen pulverbeschichtet nach Farbkarte, Polsterbezug nach Farbkarte. Mit Beinlagerungsaufnahme, hiermit können Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff schnell entnommen oder einzeln waagrecht geschwenkt werden (entfällt bei Seitenschienen).

Anschlusskabel 3 m mit Netzstecker, Anschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,94 kW. Länderspezifische Ausführungen auf Anfrage.

Nettogewicht: ca. 96 kg (114.8500.0 und 114.8600.0)
Nettogewicht: ca. 100 kg (114.8700.0)

Sichere Arbeitslast: 250 kg

Lackierung:


Hochwertige Pulverbeschichtung. Hochglänzende Oberfläche mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit. Leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig.

Polsterung:

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstlederbezug. Lieferbare Farben ohne Mehrpreis nach SCHMITZ-Farbkarte (classic und comfort).

Bestellhinweis:

Folgende Angaben sind bei der Bestellung eines Stuhles der Serie arco erforderlich: Polsterfarbe siehe Farbpalette, Pulverbeschichtung für Rahmen siehe Farbpalette.



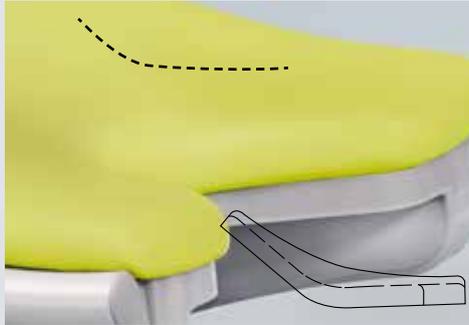


Gerade geformtes Sitzprofil für eine entspannte und fachgerechte Untersuchungsposition.



Sekretschale aus Edelstahl im Kunststoffrahmen, in fester Positionierung pendelnd gelagert.

Verstellfunktionen und Maße

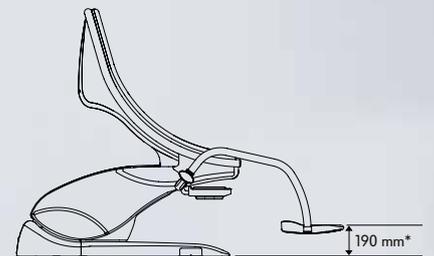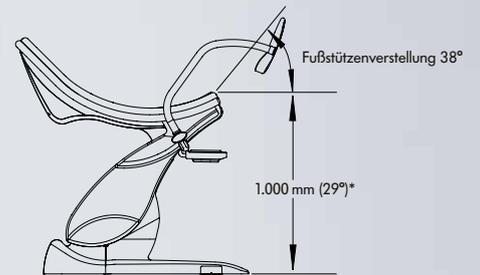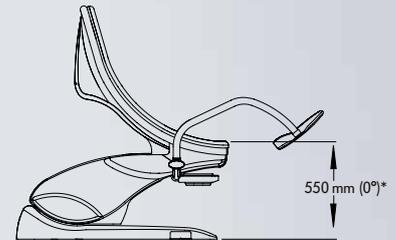

Bodenplatte 1.134 x 605 mm

Polsterbreite 595 mm (Sitzbereich)
bis 650 mm (Rückenbereich)
Polsterstärke 50 mm

* in Verbindung mit der Fahrbarkeit 101.0466.0 + 11 mm.
Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.



Beckenhochlagerung
114.8500.0 bis 114.8700.0

elektrische Fußstützenverstellung
114.8700.0

arco

Beinlagerungssysteme

1

Fußstützen (Paar) 101.0456.0

mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet nach Farbkarte, schwenk- und feststellbar. Schutzüberzüge aus durchsichtigem Kunststoff für Fußplatten.

2

Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar) 101.0457.0

mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet nach Farbkarte, Integralschaumpolster silbergrau, mit Festschnallgurten, Stange aus Chromnickelstahl 18/10.

3

Beinhalter nach Göpel (Stück) 101.0459.0

Integralschaumpolster in silbergrau, mit Festschnallgurt, Stange aus Chromnickelstahl 18/10, ohne Spannkloben. (Bitte Seitenschiene 101.0461.0 und Spannkloben 101.1670.0 berücksichtigen.)

Spannkloben (Stück) 101.1670.0

drehbar, aus Chromnickelstahl 18/10, zur Montage auf Seitenschiene.

4

Seitenschiene (Paar) 101.0461.0

für das Sitzteil, aus Chromnickelstahl 25 x 10 mm, 290 mm lang.



1

101.0456.0



2

101.04570



3

101.0461.0, 101.0459.0 und 101.1670.0



4

101.0461.0

arco Zubehör

1
Kunstlederbezug (Paar) 101.0473.0
für Handgriffbügel der Fußstützen,
mit Reißverschluss, nach Farbkarte.

2
Kunstlederbezug (Paar) 101.0474.0
für Handgriffbügel der Beinhalter nach Göpel,
mit Reißverschluss, nach Farbkarte.

3
Kopfpolster 101.0472.0
mit Magnetbefestigung, Kunstlederbezug
nach Farbkarte.

4
Schutzüberzüge (Paar) 101.0475.0
aus durchsichtigem Kunststoff, für Fußstützplatten.

Schutzbezug 101.0476.0
für das Sitzpolster.
(o. Abb.)

5
Papierrolle 101.0489.0
500 mm breit, für integriertes Magazin.

6
**Sekretschale
mit Komforthalterung 101.0495.0**
aus Edelstahl, im Kunststoffrahmen, immer in waage-
rechter Position, ausziehbar und herausnehmbar,
325 x 175 x 65 mm (B x L x H), 2,5 Liter Volumen.





6

101.0462.0



8

101.0467.0



7

101.0482.0 und 101.0481.0



9

101.0487.0 und 101.0488.0



10

101.0469.0



11

101.0466.0

6

Seitenschienen (Stück) 101.0462.0
für das Sitzteil, aus Chromnickelstahl 25 x 10 mm,
150 mm lang.

7

2 Steckdosen 101.0482.0
gemäß EN 60601-1.
(Nachrüstung nicht möglich)

2 Steckdosen 101.0483.0
wie Steckdosen 101.0482.0,
jedoch Schweizer Ausführung.
(Nachrüstung nicht möglich)
(o. Abb.)

Potentialausgleichsbuchse 101.0481.0

8

Kolposkophalterung 101.0467.0
für Systeme Leisegang, Leica, Kaps und Zeiss,
rechts oder links montierbar. Für Systeme Kaps
und Zeiss, bitte Anschlussrohr mit Klemmhalter
beim Kolposkophersteller mitbestellen!
(ohne Kolposkop)

9

LED Ambientebeleuchtung 101.0487.0
beidseitige LED-Beleuchtung oberhalb der Farb-
blende, Farbauswahl mit 13 verschiedenen Farben,
wechselbar über Schalter unter der Farbblende,
abgestimmter Farbton voreingestellt auf die
gewählte Polsterfarbe (weißes LED Licht bei
braunem, schwarzem und grauem Polsterfarbton).

Farbblende 101.0488.0

farbige Blende, optisch passend zur Polsterfarbe.

10

Fußbügel für den Arzt 101.0469.0
aus Sicht des Patienten links montiert.

Fußbügel für den Arzt 101.0468.0
aus Sicht des Patienten rechts montiert.
(o. Abb.)

11

Fahrbarkeit 101.0466.0
2 Doppelrollen Ø 75 mm, 4 Bockrollen Ø 50 mm,
elektrisch leitend, mit Zentralfeststellung.
(nachrüstbar)

Hinweis:
Nicht zulässig für den Patiententransport!

Zentralfeststellung


Planungsbeispiel



Abbildung:
arco Farben:
Polster limette 99
Lackierung weißaluminium RAL 9006
Kunststoffteile silbergrau

Untersuchungssitz Farbe:
Polster limette 99

Orbit Farben:
Körper weißaluminium RAL 9006
Front laubgrün RAL 1206050
Blendleiste laubgrün RAL 1206050
Bügelgriffe halbrund limonengrün RAL 1008060
Kunststoffteile silbergrau

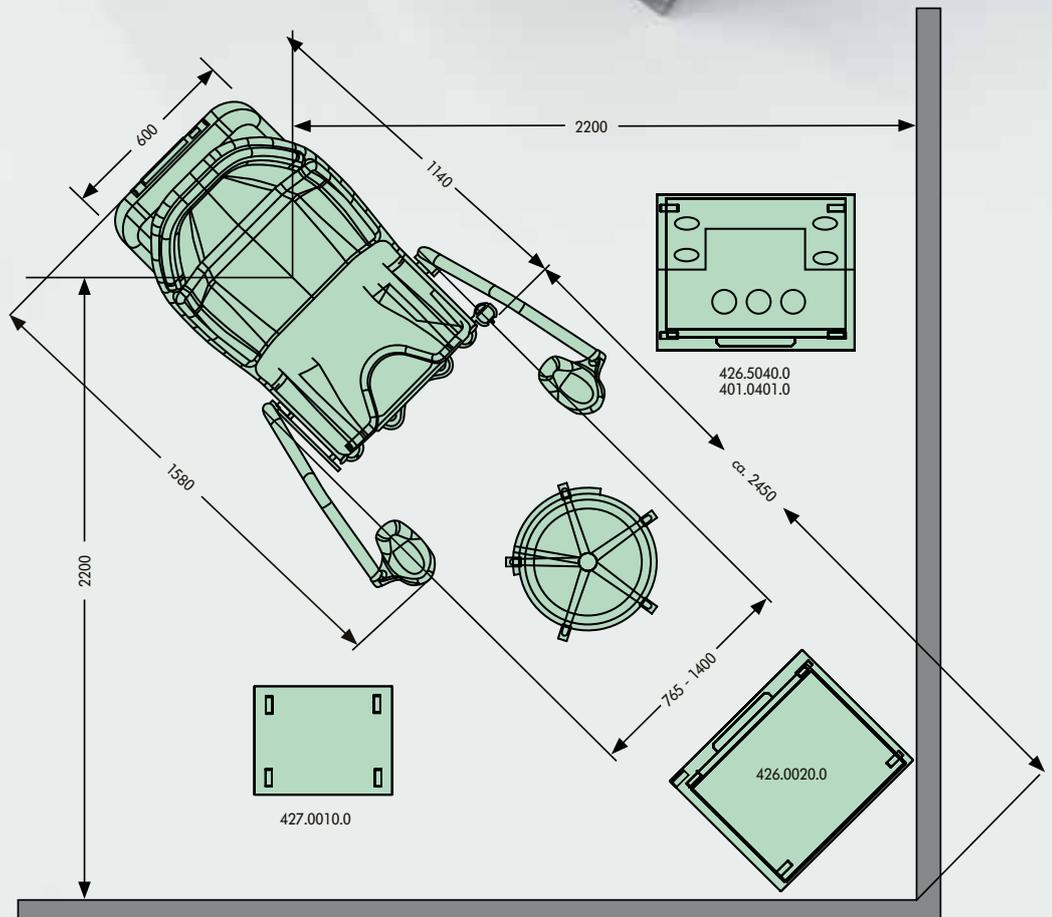

Der Online-Farbkonfigurator: Sie haben die Farbwahl



Ausgewählte Farben:

Lackierung:
weißaluminium RAL 9006
Polster:
himbeerrot 103
Kunststoffteile:
silbergrau

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben im Farbkonfigurator aufgrund verschiedenster Monitor-/
Grafikkarteneinstellungen nicht farbecht sind und wir deshalb keine Gewähr übernehmen können.
Bild zeigt Modell Nr. 114.8700.0 mit Fußstützen 101.0456.0, dem Kunstlederbezug für Handgriffbügel 101.0473.0,
der Sekrethschale mit Komforthalterung 101.0495.0 und der Farbblende 101.0488.0.

Lackierungen



Kunstleder comfort



Kunstleder classic



Entdecken Sie neue Farbwelten

Mit dem Online-Farbkonfigurator von SCHMITZ können Sie verschiedene Farbkombinationen ausprobieren und in Ruhe auf sich wirken lassen.

Mit insgesamt 22 Polster- und 22 Lackierungsfarben haben Sie viele Möglichkeiten, in Ihren Räumen Farbakzente zu setzen.

Ob gedeckt oder fröhlich, klassisch oder modern, elegant oder extravagant – bei uns finden Sie garantiert schnell den passenden Farbton.

Lassen Sie sich inspirieren:
www.schmitz-soehne.com

Farben für Lackierungen, Kunstlederbezüge und Kunststoffe

Lackierungen



grauweiß RAL 9002



reinweiß RAL 9010



alabastergrau RAL 0007500*



lichtgrau RAL 7035



anthrazitgrau RAL 7016




tiefschwarz RAL 9005



weißaluminium RAL 9006



graualuminium RAL 9007




rapsgelb RAL 1009050*



signalgelb RAL 1003



pastellorange RAL 2003



hellelfenbein RAL 1015



saharabeige RAL 0607030*



altrosa RAL 3014




erikaviolett RAL 4003



blutorange RAL 2002



lichtgrün RAL 6027

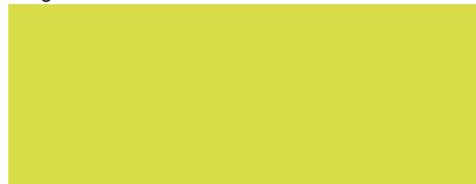

limonengrün RAL 1008060*



laubgrün RAL 1206050*



weißblau RAL 2408015*



hellblau RAL 2606030*



saphirblau RAL 5003

Kunstleder comfort



blütenweiß 84



goldgelb 86



mandarine 98



karminrot 92



himbeerrot 103



karibikblau 82



atlantikblau 83



topas 105



opalgrün 100



apfelgrün 94




limette 99



milchkaffee 102



naturbraun 93

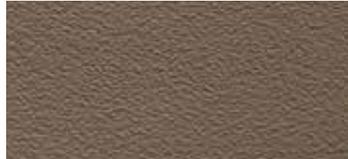

haselnuss 104



sandbeige 101



steingrau 96



schiefergrau 97



titangrau 91

Kunstleder classic



weiß 53



silbergrau 55




ozean 52



schwarz 57

Kunststoff

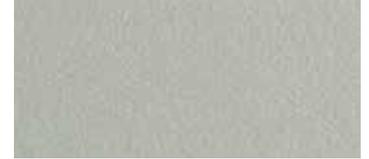

silbergrau

Wir empfehlen:
Spezialreiniger für Kunstleder
Artikel-Nr. 2019878
Sprühflasche mit 500 ml Inhalt
(Verpackungseinheit 3 Flaschen).

Reinigungsset Polster,
Artikel-Nr. 2026973
eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt
und eine Bürste.

Detaillierte Informationen zur
Reinigung und Desinfektion der
Polster finden Sie in unseren
jeweiligen Gebrauchsanweisungen.



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

58734 Wickede (Ruhr)
Postfach 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
T +49 (0)2377 84 0
F +49 (0)2377 84 162
www.schmitz-soehne.com
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:
T +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
T +49 (0)2377 84 550
F +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse 1.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



f /schmitz.soehne

Gebietsverkaufsleitungen in Deutschland und Österreich:

Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen

Christian Lohr
M +49 (0)162 2567988
lohr@schmitz-soehne.de

Nordrhein-Westfalen

Frank Spiekermann
M +49 (0)162 2565915
spiekermann@schmitz-soehne.de

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Marco Keil
M +49 (0)162 2150822
keil@schmitz-soehne.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg

Christina Bichler
M +49 (0)162 4013004
bichler@schmitz-soehne.de

Bayern, Österreich

Thomas Prantner
T +49 (0)8245 904005
F +49 (0)8245 968568
M +49 (0)1520 9077059
prantner@schmitz-soehne.de

Niederlassung:

Schweiz

SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
T +41 (0)31 75565 88
F +41 (0)31 75565 89
M +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

Informationen zu weiteren Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer Internetseite.

Das komplette SCHMITZ-Programm


OPX mobilis® Operationstische für Ambulanz und OP
Beispielhaft flexibel und zuverlässig




DIAMOND Operationstische der Extraklasse



Gynäkologie, Urologie, Proktologie
Perfekt und sinnvoll eingerichtet

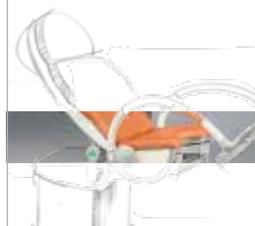

Zubehör für DIAMOND und OPX-mobilis® Operationstische

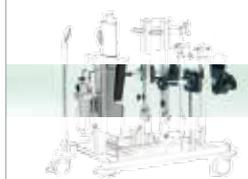

vidan2
Das Full-HD Videokoloskop



varimed® Funktionswagen - unsere Experten für den Klinikalltag



STL 285, STS 282, STX 280
Spezialtische für Patiententransport, Notfall, Ambulanz, Intensivpflege und Röntgen



varimed® Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung



varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Partura®
Das SCHMITZ-Entbindungsbett
Komfortabel und sicher - für eine präventive Geburtshilfe



Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. SCHMITZ-Katalog Nr. 101, 10.2017 Schutzgebühr 3,00 Euro.