

works.



**WORKSTOOLS. ARBEITSHOCKER UND ARBEITSSTÜHLE FÜR PRAXIS UND KLINIK.**

 **GREINER**

# workstools.



## MEDIZINISCHE ARBEITSHOCKER UND -STÜHLE NACH MASS.

Das Programm der GREINER Arbeitshocker ist so vielseitig, wie das Arbeitsleben in Klinik und Praxis. Als Sitzmöbel Made in Germany begleiten sie seit vielen Jahren den Arbeitsalltag von Medizinern rund um die Welt – von der Untersuchung über die Behandlung bis in den OP. Einerseits passend zum GREINER Liegenprogramm in den individuellen Fach- und Einsatzbereichen, andererseits natürlich mit ihren eigenen Stärken bei Anatomie, Ergonomie und Funktionalität. Mit einem Wort: Tag für Tag helfen sie, den medizinischen Alltag besser, leichter und ergonomischer zu machen. Gutes Sitzen in bester Qualität, das die Abläufe erleichtert und zugleich den Rücken stärkt.



## WE DESIGN QUALITY.

Mit innovativen Leistungsmerkmalen hat es GREINER stets geschafft, den Unterschied bei Arbeitshockern darzustellen. Dazu zählt die Erfüllung hygienischer und behandlingstechnischer Anforderungen ebenso wie die variantenreiche Auswahl bei Sitzhöhen und Polstern, die Höhenverstellung mit 360° Handring- oder Fußauslösung der Gasdruckfeder sowie die Wahl bei Untergestell und Rollen. In der hauseigenen Schäumerei und Näherei entstehen Arbeitshocker und -stühle von erstklassiger Qualität, die Stück für Stück vor einem glänzenden Arbeitsleben stehen. Ausgesprochen komfortabel ist der Bezug in Premiummaterial, der die Sitzqualität fühlbar verbessert. Natürlich erfüllen alle Arbeitshocker die klinischen Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Hygiene, während Nachhaltigkeit in der Produktion und dauerhafte Ersatzteilversorgung gewährleistet sind.

### Medizinische Arbeitshocker und Arbeitsstühle.

- Breite Auswahl durch Modelle mit Hand- oder Fußauslösung, feststehende oder mobile Ausführung, mit schwenk- und höhenverstellbarer Rückenlehne
- Hoher Komfort und Erfüllung steriler Anforderungen durch innovative Höhenverstellung: ergonomische Ringauslösung per Hand oder die ringförmige Bodenplatte zur Fußauslösung
- Drei unterschiedliche Sitzhöhen zur Anpassung an die Körpergröße, Sitzpolster mit einem Durchmesser von 36 cm oder 40 cm und mit abgeschrägter anatomischer Sitzkante
- Modell mit Sitzfläche aus Vollschaum für spezielle Hygieneanforderungen
- Sicherheitsrollen halten den Arbeitshocker bei Stillstand in Position
- Oberflächenmaterialien Compact und Premium nach Wahl: vielseitige Farbauswahl siehe Farbkarte



## DESIGN, DAS DEN RÜCKEN STÄRKT.

Sitzen wie ein Profi – arbeiten wie ein Profi. Anatomie, Ergonomie und Funktionalität prägen das Produktdesign der GREINER Arbeitshocker und -stühle. Moderner Sitzkomfort steht dabei nicht nur für komfortable Polster und leichtgängige Rollen – vielmehr leistet jedes funktionale Detail seinen Beitrag zu einer aktiven, ergonomischen und ermüdungsfreien Sitzposition.



Arbeitshocker vielseitig passend zu jeder Behandlungs-  
liege



Große Rückenlehne vorn



Große Rückenlehne hinten



Fußauslösung mit Fußring



Hygienische Edelstahl-Ronde



Ermüdungsfreies Handling durch  
Stützung für Arme oder Rumpf



OP-gerechte Ausstattung ELECTRA  
mit elektrischer Leitfähigkeit



Bezug leitfähig „black“ ELECTRA



Elektrisch leitfähige  
Sicherheitsrollen ELECTRA



**Halbmondrücken**  
Kombinierte Rücken-/Armlehne,  
schwenk- und höhenverstellbar

**Anatomisches Sitzpolster**  
Perfekte Ergonomie für Unter-  
suchung und Behandlung

**Handauslösung**  
Höhenverstellung mit ver-  
chromtem Handgriff für sanfte  
und exakte Bewegung

**Sitzhöhe nach Maß**  
Säule und Gasdruckfeder  
wählbar in verschiedenen  
Höhenvarianten

**Unterteile nach Wahl**  
Hier Fußring verchromt,  
Varianten siehe unten

**Sicherheitsrollen**  
Leichtlaufende Rollen mit Stopp-  
funktion bei Belastungswechsel

**Unterteile nach Wahl**  
Kreuzfuß aus poliertem  
Aluminium, Varianten  
siehe unten

Da sage nochmal jemand: „Alle Hocker sind gleich.“ Dann nehmen wir das Design der GREINER worktools unter die Lupe – von unten nach oben: Sicherheitsrollen ohne/mit Zentralarretierung oder Gleiter? Gasdruckfeder kurz, mittel oder lang für unterschiedliche Sitzpositionen? Höhenverstellung mit Ringauslösung per Hand oder „hands-free“ mit dem Fuß? Sitzpolster, von Hand gepolstert und vernäht – rund oder anatomisch geformt, Oberfläche in compact oder premium Material, oder doch ein Sitz aus Integralschaum – superweich, mit hygienischer atmungsaktiver Oberfläche? Dazu die Rückenlehne, ob klein oder groß, schwenkbar als Rücken-/Armlehne in Halbmondform, oder ganz ohne? Und schließlich die Frage nach OP-gerecht elektrischer Leitfähigkeit von Polster, Säule und Rollen? Weitere Fragen? Zeit, ins Detail zu gehen.

**Sitzpolster Ø 36 oder 40 cm**  
Polsterradien nach Wunsch,  
Oberfläche in compact oder  
premium



**360° Ring-Handauslösung**  
Höhenverstellung ringsum  
flexibel aus jeder Sitzposition

**Säule verchromt**  
Hochwertige und  
langlebige Oberflächen

## VIELFALT IST TRUMPF – DIE UNTERTEILE.

So sieht freie Auswahl aus: Die Unterteile der GREINER Arbeitshocker und -stühle eint ihre glänzende Ausführung, Qualität und Werthaltigkeit. Ansonsten sind sie eher vielseitig und bedarfsgerecht. Die von GREINER entwickelte Fußauslösung beispielsweise bietet überall dort, wo mit sterilen oder kontaminierten Handschuhen gearbeitet wird, einen hohen klinischen Mehrwert. Ausgelöst durch die über dem Kreuzfuß angebrachte runde Pedalplatte ist sie ringsum „hands-free“ zu bedienen. Alle Arbeitshocker besitzen Sicherheitsrollen, auf Wunsch in elektrisch leitender Ausführung.




Ring-Handauslösung, Kreuzfuß



Ring-Handauslösung, Fußring



Fußauslösung mit Fußring

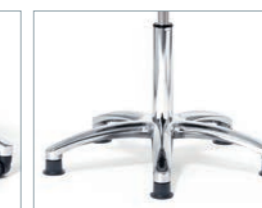

Kreuzfuß mit Gleitern



Zentralarretierung



Neues Design,  
neue Handauslösung



Modern funktionales Design



Rückenlehne aus geschäumtem  
Material



Atmungsaktives Sitzpolster

## INTEGRALSCHAUM – HYGIENE PUR.

Innovativ sein heißt, Produkte und ihren Nutzen stets neu vor dem Hintergrund sich wandelnder Erfordernisse oder der Entwicklung fortschrittlicher Technologien und Materialien zu bewerten. Und wenn eine wegweisende Generation von Materialien sich als marktreif erweist, diese dann auch in Produktneuheiten umzusetzen. Für die klinische Anwendung steht mit dem neuen PUR-Integralschaum jetzt ein Material aus der Gruppe der Polyurethane für Sitzpolster und Rückenlehnen bereit, das neben einem weichen und atmungsaktiven Kern eine nach außen hin zunehmend festere Struktur aufweist.

Sitze aus Integralschaum entwickeln hohen Sitzkomfort, ein angenehmes Sitzklima, sind robust im Handling und frei von Nähten – dadurch sehr einfach zu reinigen und desinfizieren. Das Material ist leicht und fördert dynamisches Sitzen mit aktiven Positionswechseln. Pflegeleicht und abwaschbar zeichnet sich PUR durch seine Strapazierfähigkeit gegen viele Arten von Reinigern und Desinfektionsmitteln aus.

### Dynamischer Rücken pur

Die fest stehende Rückenlehne in Halbmondform gibt sicheren Halt und kann auch als Armlehne verwendet werden.

### Sitzkomfort pur

Die Sitzfläche mit 85 mm starkem PUR-Integralschaum ist angenehm weich, frei von Nähten und fühlt sich besonders gut an, wenn man sehr lange darauf sitzen muss.



### Leichtigkeit pur

Dieser Arbeitshocker mit Fußauslösung ist von GREINER aus speziellem Integralschaum gefertigt. Er ist angenehm leicht. Klimakanäle für den Luftaustausch garantieren ein angenehmes Sitzklima.



### Innovation pur

Integralschaum garantiert durch geschlossene, stoß- und wasserfeste Oberflächen einen rutschfesten Halt. Daneben zeichnet er sich durch seine Strapazierfähigkeit gegen Reinigungsmittel vieler Art aus.





## WORKTOOLS. ARBEITSHOCKER UND -STÜHLE FÜR ERGONOMISCHES SITZEN.

Ergonomischer Sitzkomfort, der überzeugt: das breite Programm der Arbeitshocker und -stühle mit oder ohne Rückenlehne fördert Ihre Leistungsfähigkeit bei Untersuchung und Behandlung. Bei GREINER finden Sie eine hochwertig verarbeitete Produktpalette, die Sie mit einer Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen perfekt nach Ihren Anforderungen auswählen und anpassen können. Auch in punkto Form und Farbe finden Sie sicher die Variante, die in Ihr individuelles Umfeld passt. Zudem sind alle Bezugstoffe biokompatibel, hitzebeständig, desinfektionsmittelbeständig, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich und langlebig. Das OP-Bezugsmaterial ELECTRA besitzt einen Kohlefaseranteil und ist dadurch elektrisch leitfähig.

Lassen Sie sich inspirieren: Hier sehen Sie eine kleine Auswahl aus der Produktpalette der GREINER Arbeitshocker und -stühle. Hocker ohne Rückenlehne, Stühle mit Lehne in verschiedenen Ausführungen. Höhenverstellung per Hand oder Fuß. Unterteile und Sitzhöhen nach Wahl. Polstermaterialien in unterschiedlichsten Farbtönen erhältlich. Oder die OP-gerechte Ausstattung ELECTRA mit elektrisch leitfähigen Komponenten. Sie haben die Wahl.



**ARBEITSHOCKER 57 - 76 cm.**  
Art.-Nr. 3008305  
Kreuzfuß poliert, Sitzpolster Ø 36 cm, Ringauslösung, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSHOCKER 57 - 76cm.**  
Art.-Nr. 4108305 RG 01  
Kreuzfuß poliert mit Gleitern, Sitzpolster Ø 40 cm, Ringauslösung.



**ARBEITSHOCKER 57 - 76 cm.**  
Art.-Nr. 3008305  
Kreuzfuß poliert, Sitzpolster Ø 36 cm, Ringauslösung, Sicherheitsrollen.



**OP-ARBEITSHOCKER 54 - 74 cm.**  
Art.-Nr. 4105305 ELECTRA  
Fußauslösung, Sitzpolster Ø 40 cm, Bezug leitfähig ELECTRA, Säulenverkleidung und Sicherheitsrollen elektrisch leitfähig.



**ARBEITSHOCKER 57 - 76 cm.**  
Art.-Nr. 3009105  
Fußring verchromt, Sitzpolster Ø 36 cm, Ringauslösung, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSHOCKER 43 - 55 cm.**  
Art.-Nr. 4108105  
Kreuzfuß poliert, Sitzpolster Ø 40 cm, Ringauslösung, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSHOCKER 57 - 76 cm.**  
Art.-Nr. 4129105  
Fußring verchromt, Sitzpolster anatomisch Ø 40 cm, Ringauslösung, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSHOCKER 46 - 58 cm.**  
Art.-Nr. 3008205 ZENTRAL  
Kreuzfuß poliert mit Zentralarretierung, Sitzpolster Ø 36 cm, Ringauslösung.



**ARBEITSSTUHL 57 - 76 cm.**  
Art.-Nr. 4019105  
Fußring verchromt, Sitzpolster und Halbmondrücken aus Integralschaum, Schwarz, Ringauslösung, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSSTUHL 43 - 55 cm.**  
Art.-Nr. 3018105  
Kreuzfuß poliert, kleine Rückenlehne höhenverstellbar, Sitzpolster Ø 36 cm, Ringauslösung, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSSTUHL 54 - 74 cm.**  
Art.-Nr. 4015305  
Fußauslösung, Sitzpolster und Halbmondrücken aus Integralschaum, Schwarz, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSSTUHL 54 - 74 cm.**  
Art.-Nr. 3045305  
Fußauslösung, Rückenlehne höhenverstellbar, Sitzpolster Ø 40 cm, Sicherheitsrollen.



**ARBEITSSTUHL 57 - 76 cm.**  
Art.-Nr. 4185105  
Fußring verchromt, Rückenlehne schwenk- und höhenverstellbar, Sitzpolster anatomisch Ø 40 cm, Höhenverstellung mit Handbügel, Sicherheitsrollen.



**OP-ARBEITSSTUHL 54 - 74 cm.**  
Art.-Nr. 4185305 ELECTRA  
Fußauslösung, Rückenlehne schwenk- und höhenverstellbar, Sitzpolster anatomisch Ø 40 cm, Bezug leitfähig ELECTRA, Säulenverkleidung und Sicherheitsrollen elektrisch leitfähig.



**SATTELHOCKER 61-80 cm.**  
Art.-Nr. 4178305  
Kreuzfuß poliert, Sattelsitz, Handauslösung, Sicherheitsrollen

Die abgebildeten Beispiele sind nur eine Auswahl aus der Produktpalette.

AUF EINEN BLICK.

GREINER Arbeitshocker und -stühle in der Übersicht: Wählen Sie aus Sitzpolstern, Rückenlehnen und der Bandbreite von Sitzhöhen. Auch die Hand- oder Fußauslösung ist ein Kriterium, ebenso der Fußring. Alle worktools besitzen einen hochglanzpolierten Aluminiumkreuzfuß, eine verchromte Säule und Sicherheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in Position halten. Auch elektrisch leitende Ausführungen sind von nahezu allen Modellen erhältlich.



WORKTOOLS	
	Art. Nr.
ARBEITSHOCKER MIT RINGAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 36 CM	
♦ Arbeitshocker 43-55 cm	3008105*
♦ Arbeitshocker 49-61 cm	3008205*
♦ Arbeitshocker 57-76 cm	3008305*
♦ Arbeitshocker 49-61 cm mit Fußring	3009005
♦ Arbeitshocker 57-76 cm mit Fußring	3009105
ARBEITSSSTUHL MIT RINGAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 36 CM	
♦ Arbeitsstuhl 43-55 cm	3018105*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm	3018205*
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm	3018305*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm mit Fußring	3019005
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm mit Fußring	3019105
ARBEITSHOCKER MIT RINGAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER INTEGRALSCHAUM	
♦ Arbeitshocker 43-55 cm	4008155*
♦ Arbeitshocker 49-61 cm	4008255*
♦ Arbeitshocker 57-76 cm	4008355*
♦ Arbeitshocker 49-61 cm mit Fußring	4009005
♦ Arbeitshocker 57-76 cm mit Fußring	4009105
ARBEITSHOCKER MIT RINGAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 40 CM	
♦ Arbeitshocker 43-55 cm	4108105*
♦ Arbeitshocker 49-61 cm	4108205*
♦ Arbeitshocker 57-76 cm	4108305*
♦ Arbeitshocker 49-61 cm mit Fußring	4109005
♦ Arbeitshocker 57-76 cm mit Fußring	4109105
ARBEITSSSTUHL MIT RINGAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 40 CM, RÜCKENLEHNE HÖHENVERSTELLBAR	
♦ Arbeitsstuhl 43-55 cm	3028105*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm	3028205*
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm	3028305*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm mit Fußring	3029005
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm mit Fußring	3029105
ARBEITSHOCKER MIT RINGAUSLÖSUNG, ANATOMISCH GEFORMTES SITZPOLSTER Ø 40 CM	
♦ Arbeitshocker 49-61 cm	4128205*
♦ Arbeitshocker 57-76 cm	4128305*
♦ Arbeitshocker 49-61 cm mit Fußring	4129005
♦ Arbeitshocker 57-76 cm mit Fußring	4129105
ARBEITSSSTUHL MIT HANDAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 40 CM, HALBMONDRÜCKEN VERSTELLBAR	
♦ Arbeitsstuhl 43-55 cm	4154105*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm	4154205*
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm	4154305*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm mit Fußring	4155005
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm mit Fußring	4155105

WORKTOOLS	
	Art. Nr.
ARBEITSSSTUHL MIT HANDAUSLÖSUNG, ANATOMISCHES SITZPOLSTER Ø 40 CM, HALBMONDRÜCKEN VERSTELLBAR	
♦ Arbeitsstuhl 43-55 cm	4184105*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm	4184205*
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm	4184305*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm mit Fußring	4185005
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm mit Fußring	4185105
ARBEITSSSTUHL MIT RINGAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER UND HALBMONDRÜCKEN INTEGRALSCHAUM	
♦ Arbeitsstuhl 43-55 cm	4018105*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm	4018205*
♦ Arbeitsstuhl 57-763 cm	4018305*
♦ Arbeitsstuhl 49-61 cm mit Fußring	4019005
♦ Arbeitsstuhl 57-76 cm mit Fußring	4019105
ARBEITSHOCKER MIT FUSSAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 40 CM	
♦ Arbeitshocker 54-74 cm	4105305
ARBEITSHOCKER MIT FUSSAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER INTEGRALSCHAUM	
♦ Arbeitshocker 54-74 cm	4005355
ARBEITSSSTUHL MIT FUSSAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 40 CM, RÜCKENLEHNE HÖHENVERSTELLBAR	
♦ Arbeitsstuhl 54-74 cm	3045305
ARBEITSSSTUHL MIT FUSSAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER Ø 40 CM, HALBMONDRÜCKEN VERSTELLBAR	
♦ Arbeitsstuhl 54-74 cm	4155305
ARBEITSHOCKER MIT FUSSAUSLÖSUNG, ANATOMISCH GEFORMTES SITZPOLSTER Ø 40 CM	
♦ Arbeitshocker 54-74 cm	4125305
ARBEITSSSTUHL MIT FUSSAUSLÖSUNG, ANATOMISCHES SITZPOLSTER Ø 40 CM, HALBMONDRÜCKEN VERSTELLBAR	
♦ Arbeitsstuhl 54-74 cm	4185305
ARBEITSSSTUHL MIT FUSSAUSLÖSUNG, SITZPOLSTER UND HALBMONDRÜCKEN INTEGRALSCHAUM	
♦ Arbeitshocker 54-74 cm	4015305
SATTELHOCKER MIT HANDAUSLÖSUNG	
♦ Arbeitsstuhl 64-80 cm	4178305*
SATTELHOCKER MIT FUSSAUSLÖSUNG	
♦ Arbeitshocker 61-80 cm	4175305
* Bei diesen Modellen ist Ausstattung mit Zentralarretierung möglich. Bei Zentralarretierung ist die Sitzhöhe um 3 cm zu den aufgeführten Angaben reduziert.	

WORKTOOLS – Zubehör	
♦ Arbeitshocker in Premiummaterial	
♦ Arbeitsstuhl in Premiummaterial	
♦ Elektrisch leitende Bezüge (erhältlich in black, anthracite und grey) für Arbeitshocker und -stühle	ELECTRA
ELECTRA für OP	– Elektrisch leitendes Bezugsmaterial in Schwarz – Hygienische Edelstahl-Ronde unter dem Sitz – Pumpsäule mit schwarzem Kunststoff verkleidet – Elektrisch leitende Sicherheitsrollen
♦ Ronde (Abdeckung Edelstahl)	RONDE
♦ Gleiter anstelle von Rollen	RG 01
♦ Zentralarretierung (Sitzhöhe um 3 cm reduziert)	ZENTRAL*

Maße und technische Daten	
♦ Sitzbreite/-tiefe	Ø 36 - 40 cm
♦ Sitzhöhe	43 – 76 cm
♦ Sitzhöhe mit Fußauslösung	54 – 74 cm
♦ Sitzstärke Integralschaum	8,5 cm
♦ Sitzstärke gepolstert	7,5 cm
♦ Maximales Personengewicht	150 kg
♦ Gewicht	7 – 16 kg
♦ Gesamtbreite	67 cm
♦ Rollendurchmesser	50 mm



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 13485 und 14001.



**GREINER**

GREINER GmbH  
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany  
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99  
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de