

sita.



SITA. VARIATIONSLIEGE FÜR ALLGEMEINMEDIZIN, PRAXEN UND KLINIK.



GREINER

sita.




SITA. VARIATIONS-LIEGE FÜR ALLGEMEINMEDIZIN, PRAXEN UND KLINIK.

SITA ist das Chamäleon unter den Liegen für Klinik und Praxis. Ihre Anpassungsfähigkeit an vielfältige Einsatzbereiche, unterstützt durch variantenreiches Zubehör, bringt ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt zur Geltung. Ob als Standmodell oder fahrbar auf Rollen, ist sie in erster Linie bei Blutabnahme und Infusionstherapie, als flexible Behandlungs- oder auch als Ruhe- und Akupunkturliege zu finden. Die großzügig dimensionierten Polsterflächen, auf Wunsch wählbar in vielen Farben des superweichen GREINER Premiummaterials, das Kopfpolster und die soft ausgeführten Armauflagen sorgen für hohen Patientenkomfort.


Die Bedienung ist so einfach wie zweckmäßig: Wird der rechts angebrachte Bedienhebel nach hinten gedrückt, entriegelt die Mechanik die Rückenlehne und sie kann stufenlos bis in die Waagrechte bewegt werden. Bei Entlastung richtet sie sich dank einer Gasdruckfeder selbständig wieder auf. Hebelstellung nach vorne reguliert die Beinauflage, ebenfalls gestützt durch eine Gasdruckfeder. Perfekte Ergonomie also für die Patienten. Und hilfreiche Entlastung für das Pflegepersonal, dessen Aufgaben durch ein stabiles Untergestell für ein Patientengewicht bis 220 kg, einzeln lenkbare 10-cm-Rollen und einem Schubbügel beim fahrbaren Modell, sowie Zubehör wie Blutabnahme-Armauflage, Infusionsstange, Patiententisch und die Normschienen zur Befestigung individueller Utensilien aufs Beste unterstützt werden.



SITA – perfekt für Patienten und Pflegepersonal

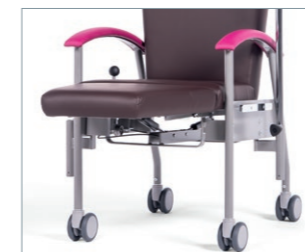

Robustes Untergestell mit leichtgängigen Rollen

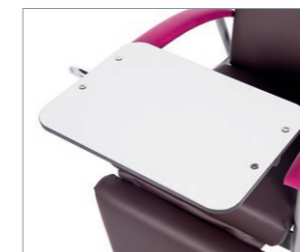

Patiententisch mit Halter, schwenk- und abnehmbar



Blutabnahme-Armauflage mit Kugelgelenk



Vielfältige Farbvarianten in den Bezugsstoffen compact/premium



Einstiegsposition



Sitzposition



Relaxposition



Bettposition/Flachlage

SITA – Zubehör

- Premiummaterial nach Farbkarte (Polster, Kopfpolster und gepolsterte Armauflagen)
- Kopfpolster in Premiummaterial
- Armauflagen gepolstert in Premiummaterial
- Blutabnahme-Armauflage in Premiummaterial
- Normschienen (Paar)
- Blutabnahme-Armauflage und Halter zur Befestigung an Normschiene, Doppelgelenk schwenkbar in alle Richtungen (1 St.)
- Infusionsständer mit Halter
- Patiententisch schwenk- und abnehmbar, rechts montiert
- Urinbeutelhalter links und rechts (Paar)
- Klarsicht-Schutzfolie für Beinauflage

SITA VARIATIONS-LIEGE.

- Variationsliege als Stand- oder fahrbares Modell
- Rückenlehne und Beinteil separat stufenlos bis zur Waagrechten einstellbar
- Hoher Komfort dank breiter Sitzfläche, Kopfpolster und soft ausgeführter Armauflagen
- Robustes Untergestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit langlebiger Mechanik – Patientengewicht bis 220 kg



SITA in Premiummaterial Chocolate/Fuchsia mit Blutabnahme-Armauflage an der Normschiene und Infusionsstange im Halter

Maße und technische Daten

• Sitzbreite	50 cm
• Sitztiefe	49 cm
• Gesamttiefe in Sitzposition	82 cm
• Gesamttiefe in Liegeposition	185 cm
• Gesamthöhe (ohne Zubehör)	126 cm
• Liegefläche	185 x 50 cm
• Sitzhöhe	55 cm
• Maximales Patientengewicht	220 kg
• Gewicht	41 kg
• Gesamtbreite	63 cm
• Rollendurchmesser	100 mm



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.



Prüfzeichen für
Qualitätsmanagement-System



GREINER

GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de